

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-LY

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina

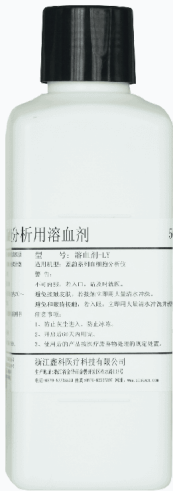


Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante-LY
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 20 L
Código de Producto	p1199

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Lisa los glóbulos rojos manteniendo inalterada la morfología de los leucocitos, para que el analizador realice el recuento y la clasificación de leucocitos mediante el método de impedancia

Composición

Sal de amonio cuaternario...

