

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-86D

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement

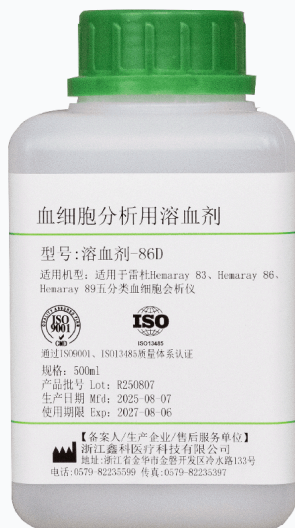


Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant-86D
Spécifications d'Emballage	500 mL, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1140

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser; si nécessaire, les leucocytes sont colorés avant la classification et la numération des cellules, ou la classification et la numération des cellules et/ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine sont réalisés directement

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes, afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes par la méthode de diffusion de la lumière laser...

