

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-UT II

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines

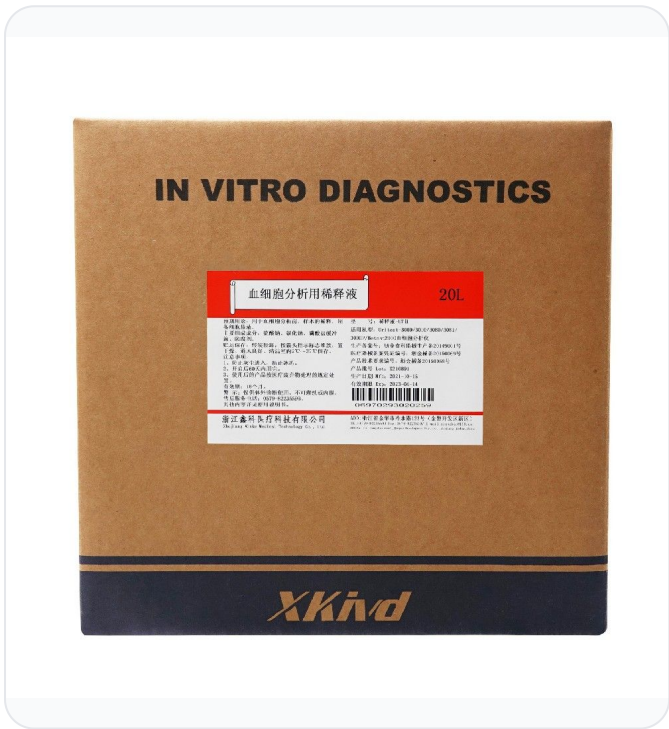


Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant-UT II
Spécifications d'Emballage	5 L, 20 L
Code Produit	p1191

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines

Principe

Il dilue les cellules sanguines et, en association avec la technique de cytométrie en flux fondée sur les méthodes d'impédance, de colorimétrie, de diffusion de la lumière laser et de coloration fluorescente, réalise la classification, la numération des cellules et le dosage de l'hémoglobine

Composition

Sulfate de sodium, chlorure de sodium, solution tampon phosphate, conservateurs...

