

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-LY

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine

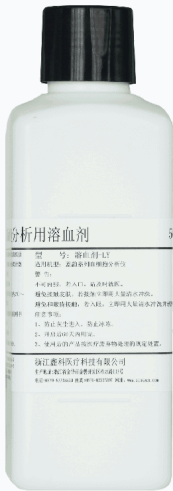


Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant-LY
Spécifications d'Emballage	500 mL, 20 L
Code Produit	p1199

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes, afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes par la méthode d'impédance

Composition

Sel d'ammonium quaternaire...

