

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-86D

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina

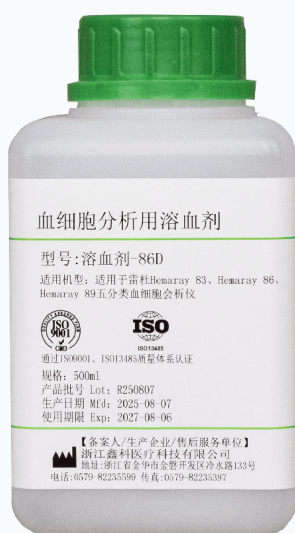


Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
86DEspecificações
de Embalagem

500 mL, 5 L, 10 L, 20 L

Código do
Produto

p1140

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de dispersão da luz laser...

