

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de Coloração-RE

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas

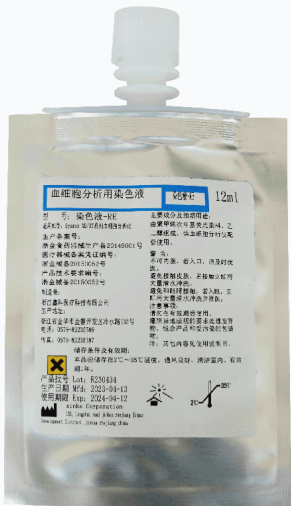


Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de Coloração-RE
Especificações de Embalagem	12 mL, 1 L, 2 L
Código do Produto	p1286

Utilização Prevista

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas

Princípio

Os leucócitos são corados com o auxílio da solução de coloração para a análise de células sanguíneas e, em combinação com a técnica de citometria de fluxo baseada na dispersão da luz laser e na coloração fluorescente, é realizada a detecção de leucócitos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.